

CASOS DE PRUEBA

ID: P-001		Título: Validación de cédula del terapeuta	
Descripción: Verificar que se ingresen cédulas existentes de los terapeutas, es decir que se encuentren en la base de datos.			
Procedimiento de prueba:			
<div><div>1.</div>Ejecutar el sistema para visualizar la pantalla de ingreso de datos.</div> <div><div>2.</div>Ingresar la cédula del terapeuta “1245789654” e ingresar la cédula del paciente “1234567890”.</div> <div><div>3.</div>Dar clic en el botón “Continuar”.</div>			
Resultados esperados:			
El sistema desplegará un mensaje de error en el caso que las cédulas no existan, sin permitir que avance al juego.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha:		Resultados obtenidos:	Reprobado (X)
01-11-2024		El resultado obtenido en el caso de prueba fue que ingresó a las configuraciones del juego sin validar la cédula del terapeuta, debido a que esta no existía y colocando otro nombre al azar de los terapeutas de la base de datos.	
Responsable:			
Alexander Vera			
Capturas:			
<div><div>Bienvenido</div><div><div>Cédula del Terapeuta:</div><div>1245789654</div></div><div><div>Cédula del Paciente:</div><div>1234567890</div></div><div>Continuar</div><div>Historial</div></div>			

Fecha: 05-11-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado real al ingresar una cédula que no existe despliega el siguiente mensaje de error comunicando que la cedula ingresada no existe, es decir, no se encuentra en la base de datos.	Aprobado (X)
--	--	-----------------------

Capturas:

localhost:4200 dice
La cédula del terapeuta no existe.

Aceptar

Bienvenido

Cédula del Terapeuta:

1245789654

Cédula del Paciente:

1234567890

Continuar

Historial

Fecha: 05-11-2024 Responsable: Alexander Vera	El caso de prueba no aplica para la nueva versión.
--	--

ID: P-002	Título: Validación del rango (inicio y fin del rango)
------------------	--


Descripción: Asegurar que el inicio del rango sea menor que el fin del rango.
--

Procedimiento de prueba: <ol style="list-style-type: none">1. Una vez ingresado al juego se desplegarán las opciones de configuración.2. Ingresar 59 en el inicio del rango y 3 en el fin del rango.3. Completar la longitud de la secuencia y la cantidad de números a encontrar.4. Dar clic en el botón "Iniciar juego".
--

Resultados esperados: El sistema desplegará un mensaje de error indicando que se ingresen valores válidos.
--

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 05-11-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar mal el rango de inicio y fin es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
--	---	-----------------------

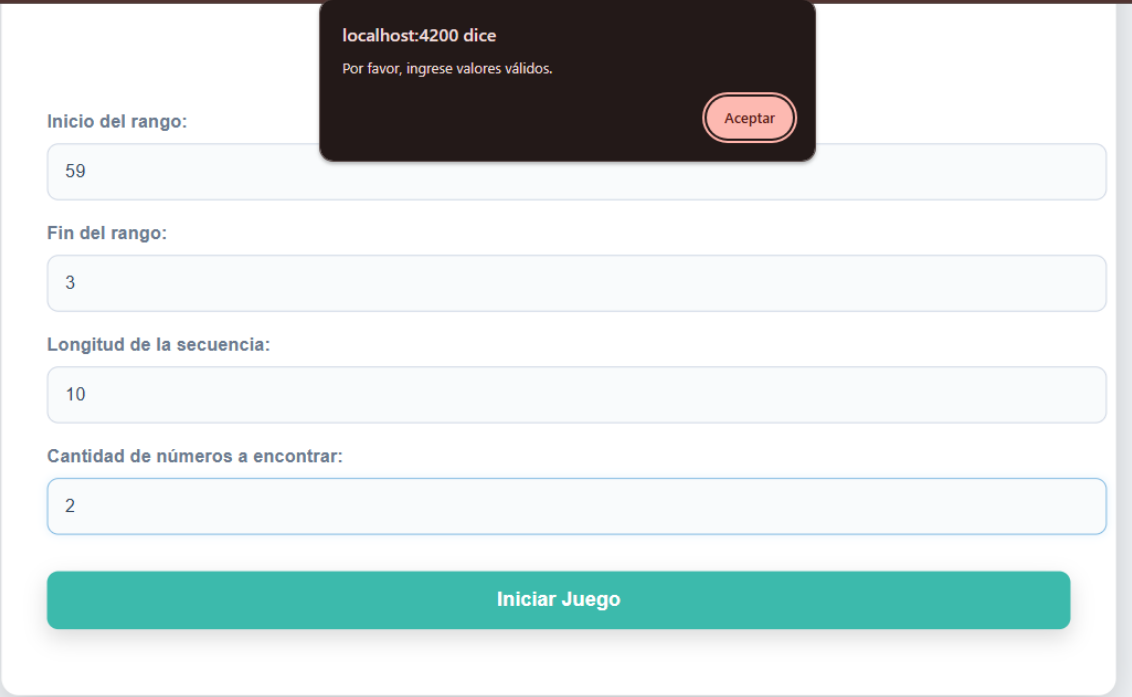Capturas: 
--

Fecha: 02-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar mal el rango de inicio y fin es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
--	---	-----------------------

Capturas:

LOCALHOST:4200 SAYS

Por favor, ingrese valores válidos.

OK

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente Pedro Martínez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

59

Fin del rango:

3

Longitud de la secuencia:

10

Cantidad de números a encontrar:

2

Iniciar Juego

ID: P-003	Título: Validación de secuencia de números positivos	
Descripción: Confirmar que todos los números en la secuencia sean positivos y estén dentro del rango especificado por el terapeuta.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Una vez ingresado al juego se desplegarán las opciones de configuración.</div><div>2. Ingresar 3 en el inicio del rango y 66 en el fin del rango.</div><div>3. Completar la longitud de la secuencia con -4 y la cantidad de números a encontrar.</div><div>4. Dar clic en el botón “Iniciar juego”.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema desplegará un mensaje de error indicando que se ingresen valores válidos		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 05-11-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar mal la longitud de la secuencia es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
Capturas:		

localhost:4200 dice
Por favor, ingrese valores válidos.

Aceptar

Inicio del rango:

3

Fin del rango:

66

Longitud de la secuencia:

-4

Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números

Iniciar Juego

Fecha: 02-12-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar mal la longitud de la secuencia es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
Responsable: Alexander Vera		

Capturas:

N TI

LOCALHOST:4200 SAYS
Por favor, ingrese valores válidos.

OK

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente Pedro Martínez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

3

Fin del rango:

66

Longitud de la secuencia:

-4

Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números a encontrar

Iniciar Juego

ID: P-004		Título: Validación de cantidad de números a encontrar	
Descripción: Asegurar que el valor ingresado en "Cantidad de números a encontrar" no exceda la longitud de la secuencia.			
Procedimiento de prueba: <div>1. Una vez ingresado al juego se desplegarán las opciones de configuración.</div> <div>2. Ingresar 3 en el inicio del rango y 66 en el fin del rango.</div> <div>3. Completar la longitud de la secuencia con 10 y la cantidad de números a encontrar 11.</div> <div>4. Dar clic en el botón “Iniciar juego”.</div>			
Resultados esperados: El sistema desplegará un mensaje de error indicando que se ingresen valores válidos.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 06-11-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar un valor superior en cantidad de números a encontrar respecto a la longitud de la secuencia es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
Capturas: <div><div>localhost:4200 dice Por favor, ingrese valores válidos.</div><div>Inicio del rango: <div>3</div></div><div>Fin del rango: <div>66</div></div><div>Longitud de la secuencia: <div>10</div></div><div>Cantidad de números a encontrar: <div>11</div></div><div>Iniciar Juego</div></div>			
Fecha: 02-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El resultado obtenido al ingresar un valor superior en cantidad de números a encontrar respecto a la longitud de la secuencia es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
Capturas:			

LOCALHOST:4200 SAYS

Por favor, ingrese valores válidos.

OK

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente Pedro Martínez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

3

Fin del rango:

66

Longitud de la secuencia:

10

Cantidad de números a encontrar:

11

Iniciar Juego

ID: P-005	Título: Prueba de inicio de juego sin parámetros	
Descripción: Intentar iniciar el juego sin ingresar valores en los campos requeridos y verificar que se muestren mensajes de error.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1.</div><div>Una vez ingresado al juego se desplegarán las opciones de configuración.</div><div>2.</div><div>No completar ningún campo de la configuración del juego.</div><div>3.</div><div>Dar clic en el botón “Iniciar juego”.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema desplegará un mensaje de error indicando que se ingresen valores válidos.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 06-11-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido al no ingresar ningún valor es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.	Aprobado (X)
Responsable: Alexander Vera		
Capturas:		

<div><div>localhost:4200 dice Por favor, ingrese valores válidos.</div><div><div>Inicio del rango:</div><div>Inicio del rango</div><div>Fin del rango:</div><div>Fin del rango</div><div>Longitud de la secuencia:</div><div>Longitud de la secuencia</div><div>Cantidad de números a encontrar:</div><div>Cantidad de números</div><div>Iniciar Juego</div></div></div>		
<div><div>Fecha:</div><div>02-12-2024</div><div>Responsable:</div><div>Alexander Vera</div></div>	<div><div>Resultados obtenidos:</div><div>El resultado obtenido al no ingresar ningún valor es el mensaje de error indicando que se debe ingresar valores válidos.</div></div>	<div>Aprobado (X)</div>
<div>Capturas:</div>		

LOCALHOST:4200 SAYS

Por favor, ingrese valores válidos.

OK

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente Pedro Martínez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

Inicio del rango

Fin del rango:

Fin del rango

Longitud de la secuencia:

Longitud de la secuencia

Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números a encontrar

Iniciar Juego

ID: P-006	Título: Verificación de tiempo de juego	
Descripción: Asegurar que el temporizador funcione correctamente y que el tiempo se registre adecuadamente en los resultados al finalizar el juego.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1.</div><div>Encontrar los números faltantes del juego.</div></div> <div><div>2.</div><div>Dar clic en el botón “Validar”.</div></div> <div><div>3.</div><div>Se desplegará la ventana de resultados.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema desplegará los resultados y se podrá visualizar el tiempo que demoro el paciente en encontrar los números faltantes.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-11-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado obtenido fue la inexistencia del tiempo de juego en los resultados.	Reprobado (X)
Capturas:		

Resultado del Juego

¡Felicidades! Has completado la secuencia de números.

Nombre del Paciente: Juan López

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo:

Aciertos: 3

Errores totales: 0

- Guardar
- Volver a intentar
- Jugar otra partida
- Inicio

Fecha: 06-11-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido fue la correcta visualización del tiempo de juego en los resultados.	Aprobado (X)
Capturas:		

Resultado del Juego

¡Felicidades! Has completado la secuencia de números.

Nombre del Paciente: Juan López

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: 48.192 segundos

Aciertos: 3

Errores totales: 0

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

Fecha: 02-12-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido fue la correcta visualización del tiempo de juego en los resultados.	Aprobado (X)
Capturas:		

Resultado del Juego

Felicidades por completar la secuencia de números!

Nombre del Paciente: Pedro Martínez

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: 5.203 segundos

Aciertos: 3

Errores totales: 0

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

ID: P-007	Título: Validación de mensajes de error durante el juego	
Descripción: Verificar que los mensajes de error sean claros y comprensibles para los usuarios mayores, especialmente en casos cuando el usuario completa la secuencia incorrectamente.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Colocar los números 22, 33 y 44 en la sección de ingresar los números faltantes.</div><div>2. Dar clic en el botón “Validar”.</div></div>		
Resultados esperados: <div>El sistema desplegará un mensaje de error “¡Incorrecto! Intenta de nuevo” debajo del botón “Validar”.</div>		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: <div>07-11-2024</div>	Resultados obtenidos:	Aprobado (X)

Responsable: Alexander Vera	El resultado obtenido fue la visualización del mensaje de error “¡Incorrecto! Intenta de nuevo”.	
Capturas:		
<div><div><div>Encuentra los Números Faltantes</div><div>Secuencia generada desde 20 hasta 29</div><div><div>22</div><div></div><div>26</div><div></div><div>20</div><div>28</div><div>29</div><div></div><div>25</div><div>27</div></div><div><div>Ingrese los números faltantes:</div><div><div>22</div><div>33</div><div>44</div></div><div>Validar</div><div>¡Incorrecto! Intenta de nuevo.</div></div></div></div>		
Fecha: 02-12-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido fue la visualización del mensaje de error “¡Incorrecto! Intenta de nuevo”.	Aprobado (X)
Responsable: Alexander Vera		
Capturas:		

¡Vamos Pedro Martínez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 5 hasta 9

7

6

Ingrese los números faltantes:

5

6

9

¡Sigue adelante, estás muy cerca!

Validar

¡Incorrecto! Intenta de nuevo.

Terminar Intento

ID: P-008	Título: Prueba de funcionalidad de historial	
Descripción: Verificar que la función de historial muestre correctamente los registros de partidas anteriores con detalles de tiempo, errores, y observaciones hechas por el terapeuta, y que permita buscar de forma efectiva.		
Procedimiento de prueba: <div>1. En la pantalla de inicio de sesión dar clic en el botón “Historial”.</div> <div>2. Ingresar el nombre del paciente “Juan López”.</div> <div>3. Dar clic en el botón “Buscar”.</div>		
Resultados esperados: El sistema desplegará el historial del paciente solicitado.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-11-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El resultado obtenido es incorrecto, debido a que no realiza el despliegue de todo el historial del paciente, sino de todos los pacientes mostrando varios tipos de identificadores de pacientes.	Reprobado (X)
Capturas:		

Historial

Buscar por nombre del paciente

Buscar

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1

Observación: Buena memoria - Tiempo: 00:15:30 - Errores: 2 - Aciertos: 8

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb2

Observación: Mejorando - Tiempo: 00:20:10 - Errores: 1 - Aciertos: 9

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1

Observación: Memoria excelente - Tiempo: 00:10:15 - Errores: 0 - Aciertos: 10

Historial

Juan López

Buscar

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1

Observación: Buena memoria - Tiempo: 00:15:30 - Errores: 2 - Aciertos: 8

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb2

Observación: Mejorando - Tiempo: 00:20:10 - Errores: 1 - Aciertos: 9

Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1

Observación: Memoria excelente - Tiempo: 00:10:15 - Errores: 0 - Aciertos: 10

Fecha: 07-11-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido es el despliegue de todo el historial de un paciente en específico, en este caso de Juan López.	Aprobado (X)
Capturas:		

<div><div>Historial</div><div><div>Buscar por nombre del paciente</div><div>Buscar</div></div><div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1</div><div>Observación: Buena memoria - Tiempo: 00:15:30 - Errores: 2 - Aciertos: 8</div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb2</div><div>Observación: Mejorando - Tiempo: 00:20:10 - Errores: 1 - Aciertos: 9</div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1</div><div>Observación: Rendimiento estable - Tiempo: 00:12:45 - Errores: 3 - Aciertos: 7</div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb5 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb2</div><div>Observación: Necesita más práctica - Tiempo: 00:25:00 - Errores: 4 - Aciertos: 6</div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb4 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1</div><div>Observación: Memoria excelente - Tiempo: 00:10:15 - Errores: 0 - Aciertos: 10</div></div></div>		
<div><div>Historial</div><div><div>Juan López</div><div>Buscar</div></div><div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1</div><div>Observación: Buena memoria - Tiempo: 00:15:30 - Errores: 2 - Aciertos: 8</div><div>Paciente: 672bd6e53d61508e4eb10eb3 - Terapeuta: 672bd6d23d61508e4eb10eb1</div><div>Observación: Rendimiento estable - Tiempo: 00:12:45 - Errores: 3 - Aciertos: 7</div></div></div>		
Fecha: 02-12-2024	Resultados obtenidos: El resultado obtenido es el despliegue de todo el historial de un paciente en específico, en este caso de Juan López.	Aprobado (X)
Responsable: Alexander Vera		
Capturas:		

Juego de Completar Números

Aplicación para ayudar a pacientes en ejercicios cognitivos

Historial

Paciente: Juan López - **Terapeuta:** Dr. Carlos Pérez

Observación: Buena memoria - **Tiempo:** 00:15:30 - **Errores:** 2 - **Aciertos:** 8

Paciente: María Rodríguez - **Terapeuta:** Dra. Ana Gómez

Observación: Mejorando - **Tiempo:** 00:20:10 - **Errores:** 1 - **Aciertos:** 9

Paciente: Juan López - **Terapeuta:** Dr. Carlos Pérez

Observación: Rendimiento estable - **Tiempo:** 00:12:45 - **Errores:** 3 - **Aciertos:** 7

Paciente: Pedro Martínez - **Terapeuta:** Dra. Ana Gómez

Observación: Necesita más práctica - **Tiempo:** 00:25:00 - **Errores:** 4 - **Aciertos:** 6

Paciente: María Rodríguez - **Terapeuta:** Dr. Carlos Pérez

Observación: Memoria excelente - **Tiempo:** 00:10:15 - **Errores:** 0 - **Aciertos:** 10

Juego de Completar Números

Aplicación para ayudar a pacientes en ejercicios cognitivos

Historial

Paciente: María Rodríguez - **Terapeuta:** Dra. Ana Gómez

Observación: Mejorando - **Tiempo:** 00:20:10 - **Errores:** 1 - **Aciertos:** 9

Paciente: María Rodríguez - **Terapeuta:** Dr. Carlos Pérez

Observación: Memoria excelente - **Tiempo:** 00:10:15 - **Errores:** 0 - **Aciertos:** 10

Volver

ID: P-009		Título: Validación de selección completa de terapeuta y paciente.	
Descripción: Asegurar que se pueda avanzar al seleccionar tanto el terapeuta como el paciente.			
Procedimiento de prueba: <ul style="list-style-type: none">1. Seleccionar un terapeuta válido de la lista desplegable.2. Seleccionar un paciente válido de la lista desplegable.3. Dar clic en el botón “Continuar”.			
Resultados esperados: El sistema permite avanzar a la siguiente pantalla de configuración del juego.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El sistema permitió avanzar correctamente al seleccionar tanto el terapeuta como el paciente.	Aprobado (X)
Capturas: <div><div><div><h3>Juego de Completar Números</h3><p>Aplicación para ayudar a pacientes en ejercicios cognitivos</p><div><div>Bienvenido</div><div><div>Seleccione el Terapeuta:</div><div>Dr. Carlos Pérez</div><div>Seleccione el Paciente:</div><div>María Rodríguez</div><div>Continuar</div><div>Historial</div></div></div></div></div></div>			
© 2024 Juego Cognitivo. Todos los derechos reservados.			

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente María Rodríguez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

Inicio del rango

Fin del rango:

Fin del rango

Longitud de la secuencia:

Longitud de la secuencia


Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números a encontrar


Iniciar Juego

Volver

ID: P-010	Título: Restricción al intentar continuar sin seleccionar paciente.	
Descripción: Validar que el sistema no permita continuar si solo se selecciona un terapeuta y no un paciente.		
Procedimiento de prueba: <ul style="list-style-type: none">1. Seleccionar un terapeuta válido de la lista desplegable.2. No seleccionar ningún paciente.3. Dar clic en el botón “Continuar”.		
Resultados esperados: El sistema muestra un mensaje de error.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema mostró un mensaje de error al no seleccionar el paciente, impidiendo avanzar.	Aprobado (X)
Capturas:		

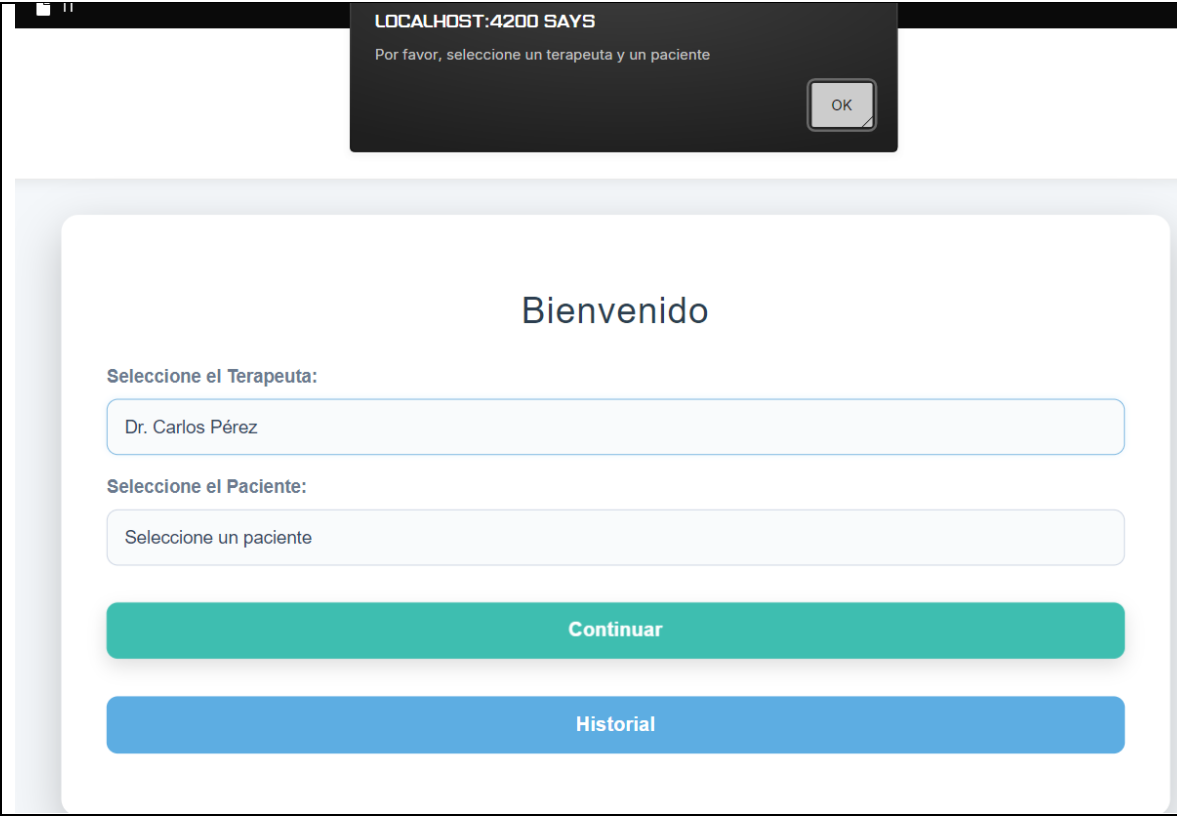

ID: P-011	Título: Restricción al intentar continuar sin seleccionar terapeuta.	
Descripción: Validar que el sistema no permita continuar si solo se selecciona un paciente y no un terapeuta.		
Procedimiento de prueba: <ul style="list-style-type: none">1. Seleccionar un paciente válido de la lista desplegable.2. No seleccionar ningún terapeuta.3. Dar clic en el botón “Continuar”.		
Resultados esperados: El sistema muestra un mensaje de error.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema mostró un mensaje de error al no seleccionar el terapeuta, impidiendo avanzar.	Aprobado (X)
Capturas:		

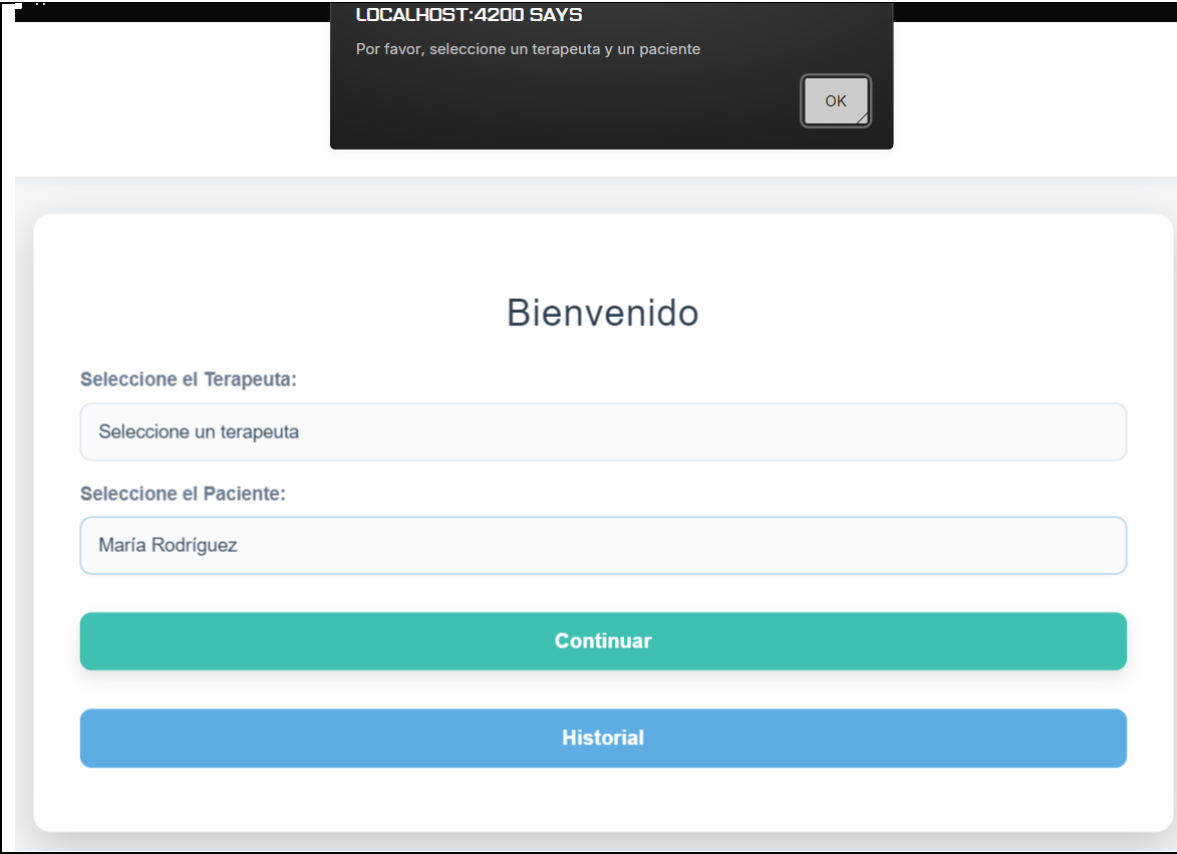

ID: P-012	Título: Validación de inicio de juego con parámetros incompletos.	
Descripción: Asegurar que no se pueda iniciar el juego si no se completan todos los parámetros requeridos.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Completar solo algunos de los campos de configuración del juego.</div><div>2. Dar clic en el botón “Iniciar Juego”.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema muestra un mensaje de error.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema mostró un mensaje de error, impidiendo iniciar el juego.	Aprobado (X)
Capturas:		

LOCALHOST:4200 SAYS

Por favor, ingrese valores válidos.

OK

Bienvenido, Dr. Rodríguez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

1

Fin del rango:

20

Longitud de la secuencia:

10

Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números a encontrar

Iniciar Juego

Volver

ID: P-013		Título: Validación de resultados con todas las respuestas incorrectas.	
Descripción: Confirmar que el sistema contabilice correctamente los errores si todas las respuestas son incorrectas.			
Procedimiento de prueba: <div><div>1.</div>Completar la partida ingresando respuestas incorrectas en todos los campos.</div> <div><div>2.</div>Dar clic en el botón “Validar”.</div> <div><div>3.</div>Finalizar el intento.</div>			
Resultados esperados: El sistema muestra la cantidad total de errores en los resultados.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El sistema contabilizó correctamente todos los errores y los mostró en los resultados finales.	Aprobado (X)
Capturas:			

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 1 hasta 10

3 9 2 6 7 8 1 4

Ingresa los números faltantes:

4

9

¡La práctica te hace mejor!

Validar

¡Incorrecto! Intenta de nuevo.

Terminar Intento

Resultado del Juego

Oh no! No has terminado la secuencia de números.

Nombre del Paciente: María Rodríguez

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: 126.262 segundos

Aciertos: 0

Errores totales: 3

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

ID: P-014	Título: Validación de resultados con todas las respuestas correctas.	
Descripción: Confirmar que el sistema contabilice correctamente los aciertos si todas las respuestas son correctas.		
Procedimiento de prueba: 1. Completar la partida ingresando respuestas correctas en todos los campos. 2. Dar clic en el botón “Validar”.		
Resultados esperados: El sistema muestra la cantidad total de aciertos en los resultados.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable:	Resultados obtenidos: El sistema contabilizó correctamente todos los aciertos y los mostró en los resultados finales.	Aprobado (X)

Resultado del Juego

Felicidades por completar la secuencia de números!

Nombre del Paciente: María Rodríguez

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: **20.748** segundos

Aciertos: 2

Errores totales: 0

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

ID: P-015	Título: Validación de resultados con respuestas mixtas (correctas e incorrectas).	
Descripción: Confirmar que el sistema contabilice correctamente los aciertos y errores si las respuestas son mixtas.		
Procedimiento de prueba: 1. Completar la partida ingresando algunas respuestas correctas y otras incorrectas. 2. Dar clic en el botón “Validar”.		
Resultados esperados: El sistema muestra la cantidad total de aciertos y errores en los resultados.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema contabilizó correctamente los aciertos y errores mixtos en los resultados finales.	Aprobado (X)
Capturas:		
<div><div><div>Resultado del Juego</div><div>Felicidades por completar la secuencia de números!</div><div>Nombre del Paciente: María Rodríguez</div><div>Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez</div><div>Escribe tus observaciones aquí...</div><div>Tiempo: 20.748 segundos</div><div>Aciertos: 2</div><div>Errores totales: 0</div><div>Guardar</div><div>Volver a intentar</div><div>Jugar otra partida</div><div>Inicio</div></div></div>		

ID: P-016		Título: Verificación de guardado de partida y visualización en el historial.	
Descripción: Verificación de guardado de partida y visualización en historial.			
Procedimiento de prueba: 1. Finalizar una partida. 2. Guardar los resultados. 3. Acceder al historial e ingresar el nombre del paciente.			
Resultados esperados: La partida guardada aparece en el historial del paciente correspondiente con todos los datos registrados.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: La partida no se guardó correctamente y no apareció en el historial del paciente con todos los datos registrados.	Reprobado (X)
Capturas:			
<div><h2>Juego de Completar Números</h2><p>Aplicación para ayudar a pacientes en ejercicios cognitivos</p></div> <div><div><h3>Historial</h3><div>Buscar por nombre del paciente</div><div><div><div>Paciente: Juan López - Terapeuta: Dr. Carlos Pérez</div><div>Observación: Buena memoria - Tiempo: 00:15:30 - Errores: 2 - Aciertos: 8</div></div><div><div>Paciente: María Rodríguez - Terapeuta: Dra. Ana Gómez</div><div>Observación: Mejorando - Tiempo: 00:20:10 - Errores: 1 - Aciertos: 9</div></div><div><div>Paciente: Juan López - Terapeuta: Dr. Carlos Pérez</div><div>Observación: Rendimiento estable - Tiempo: 00:12:45 - Errores: 3 - Aciertos: 7</div></div><div><div>Paciente: Pedro Martínez - Terapeuta: Dra. Ana Gómez</div><div>Observación: Necesita más práctica - Tiempo: 00:25:00 - Errores: 4 - Aciertos: 6</div></div><div><div>Paciente: María Rodríguez - Terapeuta: Dr. Carlos Pérez</div><div>Observación: Memoria excelente - Tiempo: 00:10:15 - Errores: 0 - Aciertos: 10</div></div></div><div>Volver</div></div></div>			

ID: P-017		Título: Configuración del juego mediante teclado.	
Descripción: Validar que el sistema permita configurar todos los parámetros del juego utilizando únicamente el teclado.			
Procedimiento de prueba: <div>1. Utilizar solo el teclado para navegar entre los campos de configuración.</div> <div>2. Configurar los valores deseados en cada campo.</div> <div>3. Presionar "Iniciar Juego" utilizando el teclado.</div>			
Resultados esperados: El sistema permite configurar y comenzar el juego sin problemas utilizando únicamente el teclado.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El sistema permitió configurar y comenzar el juego utilizando únicamente el teclado.	Aprobado (X)
Capturas:			
<div><div><div><div>Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente María Rodríguez</div><div>Inicie la configuración del juego para el paciente.</div><div>Configuración del Juego</div><div>Inicio del rango:<div>1</div></div><div>Fin del rango:<div>20</div></div><div>Longitud de la secuencia:<div>10</div></div><div>Cantidad de números a encontrar:<div>4</div></div><div>Iniciar Juego</div><div>Volver</div></div></div></div>			

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 5 hasta 14

11

5

7

8

6

10

Ingrese los números faltantes:

Númer

Númer

Númer

Númer

¡Tú puedes hacerlo! Sigue adelante.

Validar

Terminar Intento

ID: P-018		Título: Configuración del juego mediante ratón.	
Descripción: Validar que el sistema permita configurar todos los parámetros del juego utilizando únicamente el ratón.			
Procedimiento de prueba: <div>1. Utilizar solo el ratón para seleccionar los campos de configuración.</div> <div>2. Configurar los valores deseados en cada campo.</div> <div>3. Presionar "Iniciar Juego" utilizando el ratón.</div>			
Resultados esperados: El sistema permite configurar y comenzar el juego sin problemas utilizando únicamente el ratón.			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera		Resultados obtenidos: El sistema permitió configurar y comenzar el juego utilizando únicamente el ratón.	Aprobado (X)
Capturas:			

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente María Rodríguez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

Fin del rango:

Longitud de la secuencia:

Cantidad de números a encontrar:

Iniciar Juego

Volver

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 6 hasta 15

8

14

12

13

11

7

10

Ingrese los números faltantes:

0

Númer

Númer

¡Tú puedes hacerlo! Sigue adelante.

Validar

Terminar Intento

ID: P-019	Título: Interacción en la partida mediante teclado.	
Descripción: Validar que el sistema permita jugar completamente utilizando únicamente el teclado.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Utilizar solo el teclado para ingresar los valores en los campos requeridos durante la partida.</div><div>2. Presionar "Validar" utilizando el teclado.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema permite jugar y finalizar la partida sin problemas utilizando únicamente el teclado.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema permitió jugar y finalizar la partida utilizando únicamente el teclado.	Aprobado (X)
Capturas:		

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 6 hasta 15

8

14

12

13

11

7

10

Ingrese los números faltantes:

6

9

15

¡Tú puedes hacerlo! Sigue adelante.

Validar

Terminar Intento

ID: P-020	Título: Interacción en la partida mediante ratón.	
Descripción: Validar que el sistema permita jugar completamente utilizando únicamente el ratón.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Utilizar solo el ratón para ingresar los valores en los campos requeridos durante la partida.</div><div>2. Presionar "Validar" utilizando el ratón.</div></div>		
Resultados esperados: El sistema permite jugar y finalizar la partida sin problemas utilizando únicamente el ratón.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 03-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema permitió jugar y finalizar la partida utilizando únicamente el ratón.	Aprobado (X)
Capturas:		

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 5 hasta 14

10

7

11

9

5

14

6

Ingrese los números faltantes:

8

12

13

¡Tú puedes hacerlo! Sigue adelante.

Validar

Terminar Intento

ID: P-021	Título: Validación de partida sin ingresar valores.	
Descripción: Asegurar que el sistema muestre un mensaje de error si no se ingresan valores durante la partida.		
Procedimiento de prueba: 1. No ingresar ningún valor en los campos requeridos durante la partida. 2. Presionar "Validar".		
Resultados esperados: El sistema muestra un mensaje de error indicando que se deben ingresar valores en los campos requeridos.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 04-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema mostró un mensaje de error indicando que se deben ingresar valores en los campos requeridos.	Aprobado (X)
Capturas:		

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 9 hasta 18

11

16

17

9

12

10

14

Ingrese los números faltantes:

Númer

Númer

Númer

¡Tú puedes lograrlo, confía en ti!

Validar

¡Incorrecto! Intenta de nuevo.

Terminar Intento

ID: P-022		Título: Validación de partida con valores parciales.	
Descripción: Asegurar que el sistema muestre un mensaje de error si solo se ingresan algunos valores durante la partida.			
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Ingresar valores en algunos campos requeridos durante la partida.</div><div>2. Dejar otros campos vacíos.</div><div>3. Presionar "Validar".</div></div>			
Resultados esperados: <div>El sistema muestra un mensaje de error indicando que los valores deben completarse en todos los campos requeridos.</div>			
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA			
Fecha: <div>04-12-2024</div> Responsable: <div>Alexander Vera</div>		Resultados obtenidos: <div>El sistema mostró un mensaje de error indicando que los valores deben completarse en todos los campos requeridos.</div>	Aprobado (X)
Capturas:			

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 9 hasta 18

11

16

17

9

12

10

14

Ingrese los números faltantes:

11

Númer

15

¡No te rindas, casi lo tienes!

Validar

¡Incorrecto! Intenta de nuevo.

Terminar Intento

ID: P-023	Título: Reinicio de partida al seleccionar "Volver a intentar" manteniendo configuraciones iniciales.	
Descripción: Confirmar que, al reiniciar la partida, las configuraciones iniciales se mantengan.		
Procedimiento de prueba: 1. Finalizar una partida. 2. Presionar "Volver a intentar".		
Resultados esperados: El sistema inicia una nueva partida manteniendo las configuraciones iniciales.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 04-12-2024 Responsable: Alexander Vera	Resultados obtenidos: El sistema reinició la partida y mantuvo las configuraciones iniciales correctamente.	Aprobado (X)
Capturas:		

Resultado del Juego

Oh no! No has terminado la secuencia de números.

Nombre del Paciente: María Rodríguez

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: 2.559 segundos

Aciertos: 0

Errores totales: 0

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

¡Vamos María Rodríguez! Estás haciendo un gran trabajo. ¡Tú puedes lograrlo!

Encuentra los Números Faltantes

Los números a encontrar están desde 2 hasta 11

11

6

4

7

8

3

2

Ingrese los números faltantes:

Númer

Númer

Númer

¡Tú puedes hacerlo! Sigue adelante.

Validar

Terminar Intento

ID: P-024	Título: Redirección a configuraciones del juego al seleccionar "Jugar otra partida".	
Descripción: Validar que el sistema redirija correctamente a la pantalla de configuración del juego.		
Procedimiento de prueba: <div><div>1. Finalizar una partida.</div><div>2. Presionar "Jugar otra partida".</div></div>		
Resultados esperados: <div>El sistema redirige a la pantalla de configuración del juego.</div>		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: <div>04-12-2024</div> <div>Responsable:</div> <div>Alexander Vera</div>	Resultados obtenidos: <div>El sistema redirigió correctamente a la pantalla de configuración del juego.</div>	Aprobado (X)
Capturas:		

Resultado del Juego

Felicidades por completar la secuencia de números!

Nombre del Paciente: María Rodríguez

Nombre del Terapeuta: Dr. Carlos Pérez

Escribe tus observaciones aquí...

Tiempo: **139.163** segundos

Aciertos: 3

Errores totales: 0

Guardar

Volver a intentar

Jugar otra partida

Inicio

Bienvenido, Dr. Carlos Pérez y Paciente María Rodríguez

Inicie la configuración del juego para el paciente.

Configuración del Juego

Inicio del rango:

Inicio del rango

Fin del rango:

Fin del rango

Longitud de la secuencia:

Longitud de la secuencia

Cantidad de números a encontrar:

Cantidad de números a encontrar

Iniciar Juego

Volver